


Návod k použití – Spaderm Parafínová vanička

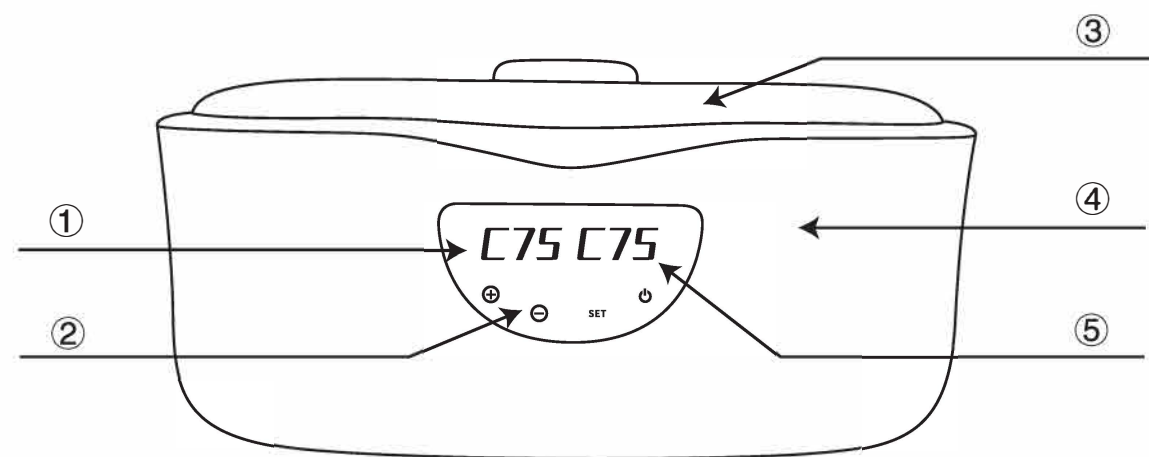

①Nastavená teplota ②Ovládací tlačítka ③Víko ④Tělo přístroje ⑤Aktuální teplota

Technické údaje

|                               |                     |                          |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Pracovní napětí/<br>frekvence | AC (110-120V/60Hz)  | <input type="checkbox"/> |
|                               | AC (220-240V /50Hz) | <input type="checkbox"/> |
| Příkon                        | 230W                |                          |

Bezpečnostní upozornění

- 1. Přístroj nepoužívejte naprázdno bez parafínu.
- 2. Používejte pouze napětí odpovídající údajům uvedeným na přístroji.
- 3. Použití se nedoporučuje na alergickou, podrážděnou nebo poškozenou pokožku, ani na pokožku s jizvami, vyrážkou nebo pupínky.
- 4. Před použitím vždy ověřte teplotu parafínu, aby nedošlo k popálení.
- 5. Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.

Zapnutí přístroje

Stisknutím tlačítka napájení zapnete parafínovou vaničku. Na levé části displeje se zobrazí hodnota „C55“ a začne blikat. V této chvíli můžete nastavit požadovanou teplotu. Pokud teplotu nenastavíte do 3 sekund, přístroj automaticky použije výchozí teplotu 55 °C. Pravá část displeje zobrazuje aktuální teplotu parafínu. Přístroj nabízí dva režimy ohřevu: Ruční režim ohřevu a automatický režim ohřevu

Ruční režim ohřevu

V ručním režimu můžete nastavit teplotu pomocí tlačítek „+“ a „-“.

- Výchozí teplota: 55 °C
- Rozsah nastavení: 45–75 °C

Pravá část displeje po celou dobu zobrazuje aktuální teplotu parafínu.

Automatický režim ohřevu

Pro spuštění automatického režimu stiskněte tlačítko „SET“. Na levé části displeje se zobrazí „H80“. To znamená, že přístroj bude parafín ohřívat po dobu přibližně 80 minut. V automatickém režimu se parafín zahřeje až na maximální teplotu 85 °C. Po dosažení této teploty začne teplota postupně klesat na provozní teplotu 55 °C. Jakmile čas ohřevu uplyne, přístroj třikrát pípne. Zvukový signál znamená, že je parafín roztavený a připravený k použití.

Důležité informace k automatickému režimu

- 1. Okolní teplota a množství použitého parafínu mohou ovlivnit dobu rozpouštění i skutečnou teplotu parafínu. Během použití proto sledujte aktuální teplotu na displeji.
- 2. V automatickém režimu nejsou tlačítka „+“ a „-“ aktivní. Pro návrat do běžného nastavení stiskněte znovu tlačítko „SET“.
- 3. Po dokončení použití přístroj vypněte tlačítkem napájení a odpojte jej ze zásuvky.

Tipy pro použití

- 1. Pro zkrácení doby rozpouštění parafínu doporučujeme parafín nakrájet na menší kousky.
- 2. Pokud používáte automatický režim ohřevu, doporučuje se otevřít víko ve chvíli, kdy zbývá přibližně jedna desetina nerozpuštěného parafínu.
- 3. Jakmile je parafín zcela rozpuštěný a displej ukazuje „55“, můžete jej začít používat. Protože je však citlivost na teplo u každého člověka jiná, doporučujeme před použitím vždy zkontrolovat teplotu. Naneste malé množství parafínu na hřbet ruky a ověřte, zda je teplota příjemná a bezpečná.
- 4. Po dokončení používání přístroj vypněte tlačítkem vypnutí a odpojte jej ze zásuvky.